

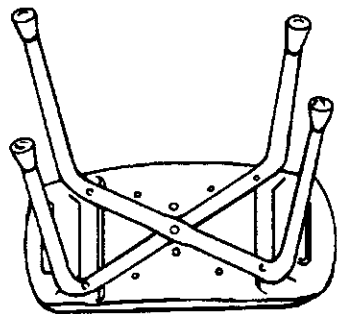
### Outils Nécessaires:

- Tournevis à tête cruciforme Philips standard

## Directives d'assemblage

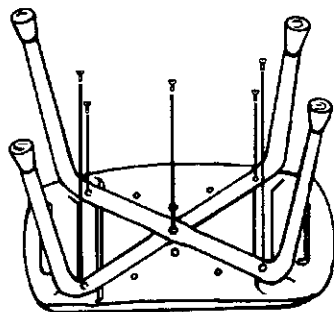
### Étape 1: positionnez les pieds

Placez le pied A1 dans la rainure A1 du siège de plastique de façon à ce que les deux repères A1 soient placés l'un à côté de l'autre. Ensuite, placez le pied A2 dans la rainure A2 sur le pied A1 de façon à ce que les deux repères A2 soient placés l'un à côté de l'autre.



### Étape 2: fixez le pieds

Insérez une vis 1 po 0.42 dans une rondelle, puis dans l'ouverture centrale du pied et du siège. Serrez en faisant plusieurs tours. Insérez les quatre vis restantes dans les rondelles, puis dans les ouvertures des quatre pieds. Serrez les cinq vis à fond. Essayez le siège. Réserrez les vis au besoin.



### Étape 3: ajustez la hauteur des pieds (DN7025)

Appuyez sur le bouton de l'un des pieds et faites le glisser jusqu'à la hauteur désirée. Relâchez le bouton, ce qui a pour effet de bloquer le pied en place. Répétez cette opération pour chaque pied, en vous assurant que tous les pieds sont réglés à la même hauteur.



### AVERTISSEMENT

Ce produit convient aux personnes d'un poids maximal de 250lb (113kg). Ne sautez pas et ne vous tenez pas debout sur le siège. Communiquez immédiatement avec le service à la clientèle CSI au 1-800-882-0116 si l'une ou l'autre des parties de ce siège est manquante ou défectueuse. Tout remplacement et toute modification d'une partie de ce siège et ce, de quelque façon que ce soit, entraîne l'annulation de la garantie. CSI n'assume aucune responsabilité à l'égard des dommages ou des blessures découlant de l'assemblage inadéquat ou encore, de l'installation ou de l'utilisation non appropriées de ce produit.

### Directives d'entretien:

Nettoyez à l'aide d'un chiffon doux humide. Les détergents et les nettoyeurs peuvent endommager le fini de ce produit.

FOR QUESTIONS OR ASSISTANCE WITH INSTALLATION, CONTACT CSI AT 1-800-882-0116.

SI TIENE PREGUNTAS O NECESITA AYUDA PARA REALIZAR LA INSTALACION, CONTACTESE CON CSI, AL 1-800-882-0116.

POUR TOUTE QUESTION OU DE L'AIDE AVEC L'INSTALLATION, CONTACTEZ CSI AU 1-800-882-0116.

Home Care is a registered trademark of Home Care Tim-BR-MART, licensed to Moen Incorporated. / Home Care es una marca registrada de Home Care Tim-BR-MART, cuyo uso fue autorizado a Moen Incorporated. / Home Care est une marque déposée de Home Care Tim-BR-Mart et Moen incorporée en est un utilisateur autorisé.

[www.homecare.moen.com](http://www.homecare.moen.com)



INNOVATIVE DESIGNS  
for independent living™

## Assembly Instructions

Fits inside all standard size tubs

## Instrucciones para el ensablado

Cabe en todas las bañeras de tamaño estándar

## Directives d'assemblage

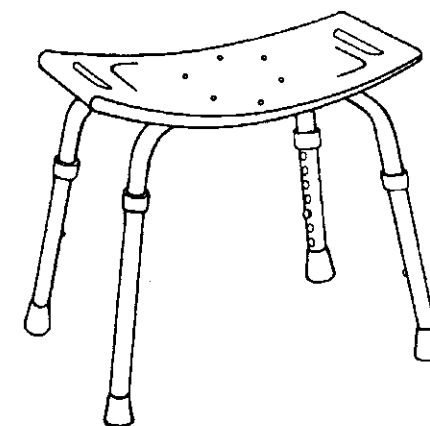
Convient à toutes les baignoires standard

DN7025

### Adjustable Tub & Shower Seat

Asiento ajustable para la bañera y la ducha

Siège réglage pour la douche et la baignoire



**Dimensions:** Adjustable height from 14" to 21"  
20" wide x 12" deep x 16" high

**Dimensiones:** Altura ajustable de 14" a 21" (355 a 533mm)

20" (505mm) de ancho x 12" (300mm) de profundidad x 14" (356mm) de alto

**Dimensions:** Hauteur réglable de 14" à 21po (356 à 533mm)

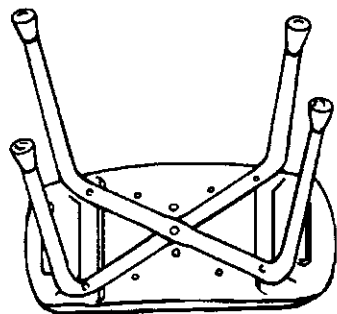
20 po (505mm) de large x 12 po (300mm) de proufond x 14" à 21po (356 à 533mm) de hauts

**Tools Required:**

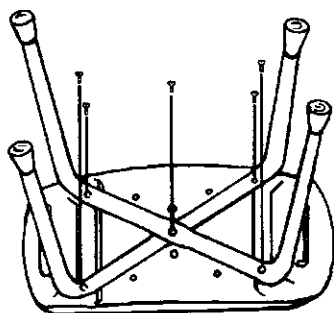
- Standard size Phillips head screwdriver

**Assembly Instructions****Step 1: Position Legs**

Place leg "1" into groove "1" of the plastic seat panel so that the number "1" marks are next to each other. Then place leg "2" into groove "2", over leg "1" so that the number "2" marks are next to each other.

**Step 2: Attach Legs**

Insert a 1 1/2" screw through a washer and the center hole of the legs and seat. Tighten several turns. Insert remaining four screws through washers into the four leg holes. Tighten all five screws fully. Test seat. Retighten as needed.

**Step 3: Adjust Leg Height (DN7025)**

Push in button on leg, slide leg to desired height and allow button to pop out and lock leg in place. Repeat for each leg, making sure all four are adjusted to the same height.

**WARNING**

This product has a maximum user weight of 250lbs. Do not jump or stand on this seat. Contact CSI immediately at 1-800-882-0116 if any components are damaged or missing. Making substitutions or modifying this product in any way will void your warranty. CSI assumes no liability for any damage or injury caused by improper assembly, installation or use of this product.

**Cleaning instructions:**

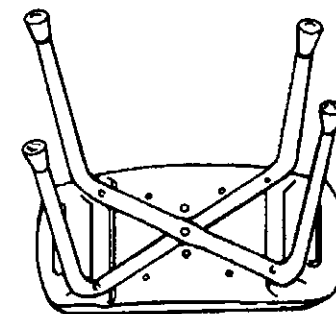
Wipe clean with a soft, damp cloth. Detergents and cleansers may harm the finish of this product.

**Herramientas Necesarias:**

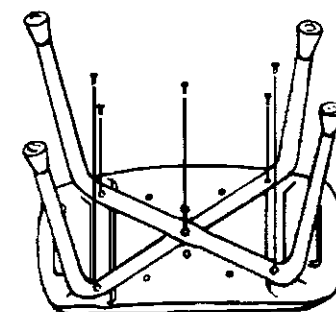
- Destornillador estándar Philips

**Instrucciones para el ensamblado****1 er paso: Coloque las patas en posición**

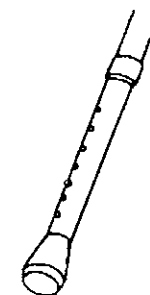
Coloque la pata A1 en la ranura A1 del panel del asiento plástico de manera que las marcas con el número A1 se encuentren cercanas unas a otras. Luego, coloque la pata A2 en la ranura A2 sobre la pata A1 de manera que las marcas con el número A2 se encuentren cercanas unas a otras.

**2 do paso: Ajuste las patas**

Coloque un tornillo de 1 1/2" a través de una arandela y del agujero central de las patas y del asiento. Ajuste en varias vueltas. Coloque los cuatro tornillos restantes a través de las arandelas en los cuatro agujeros restantes. Ajuste los cinco tornillos al máximo. Pruebe el asiento. Reajuste si es necesario.

**3 er paso: Ajuste la altura de las patas (DN7025)**

Presione el botón de la pata hacia adentro, coloque la pata a la altura deseada y deje que el botón salte y trabaje la pata en posición. Repita esto con cada pata, asegurándose que las cuatro patas se encuentren a la misma altura.

**ADVERTENCIA**

Este producto soporta un peso máximo de 250 libra (113 kg). No salte o se pare sobre el asiento. Llame al servicio de atención al cliente de CSI al 1-800-882-0116 inmediatamente si cualquiera de los componentes está dañado o falta. El hacer sustituciones o modificar este producto en cualquier forma anulará su garantía. CSI no asume ninguna responsabilidad por cualquier daño o lesión causada por ensamblado, instalación o uso inadecuados de este producto.

**Instrucciones para la limpieza:**

Límpielo con un paño suave y húmedo. Los detergentes y productos limpiadores pueden afectar el acabado de este producto.